


Fabricante Recomenda Uso Único. Esterilizados por Óxido de Etileno

Adaptador em Y- *Push and Pull* de uma via e extensão c/ torneirinha

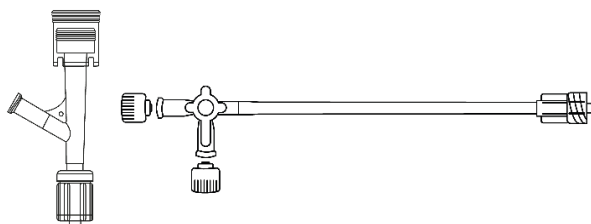

Descrição: Adaptador Y é um dispositivo em policarbonato transparente com três conexões: uma com válvula hemostática interna, *Push and Pull*, de uma via mais a extensão com torneirinha.

Indicação: Indicado nos procedimentos de angioplastia, tanto angioplastia transluminal percutânea (PTA)

quanto angioplastia coronária transluminal percutânea (PTCA). Adaptador: Possui a finalidade de proporcionar um meio para inserir, posicionar e manter fixo na posição fios-guia, cateteres com balão e/ou *stent* no interior do sistema vascular e minimizar o refluxo sanguíneo durante a manipulação de cateteres.

Modo de Uso: Somente em campo estéril e com a vestimenta adequada para procedimentos intervencionistas, abrir a embalagem assepticamente. Abrir a válvula hemostática *Push and Pull* para posicionar o passador-guia e fechá-la para controlar o retorno do sangue. Unir a conexão macho *luer* do adaptador Y ao cateter guia de angioplastia. Utilizar a conexão fêmea (com ou sem conector com torneira) juntamente com o sistema de injeção de meio de contraste e retirar o ar do sistema.

Cuidados e Advertências: Deve ser utilizado por profissionais especializados nos procedimentos de Angioplastia e com conhecimento das técnicas a serem aplicadas.

Armazenamento: Conservar em local ventilado, em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

Descarte: Descartar o produto de acordo com os procedimentos padronizados pelo hospital ou clínica, para materiais potencialmente contaminados.

Precauções: Não utilize após o prazo de validade. Não usar se a embalagem estiver aberta ou danificada. Certificar-se de que os materiais a serem conduzidos através do Adaptador Y tenham diâmetro inferior ao lúmen interno do produto. Observar as instruções de uso e recomendações de todos os acessórios a serem utilizados no procedimento.

Apresentação: Embalagem constituída de filme e papel grau cirúrgico. Na forma de apresentação: adaptador Y *Push and Pull* com conector com Torneira três vias (três pontas).