


Fabricante Recomenda Uso Único. Esterilizados por Óxido de Etileno

Cânula flexível de três vias

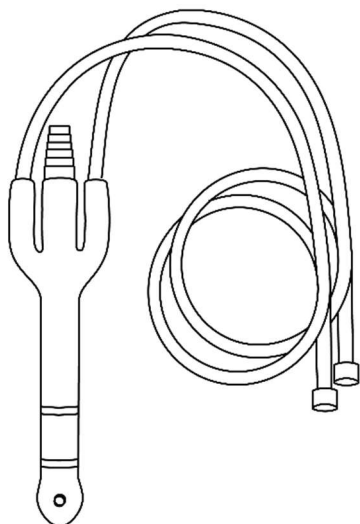

Descrição: A cânula é um dispositivo utilizado em procedimentos para administração de meios de contrastes, sendo fabricado em PVC flexível, atóxico e sem costura, o que garante maior conforto e segurança ao paciente durante o uso. O produto é disponibilizado em tamanho adulto, na versão de 3 (três) vias, atendendo às diferentes necessidades clínicas. Suas dimensões incluem diâmetro de 2,5 mm, base larga de 9 mm, base fina de 5 mm, ponta de 4,5 mm e comprimento total de 14 cm.

Indicação: Indicada para uso na radiologia digestiva na administração de meio de contraste (MC), sendo adequada para diferentes diagnósticos.

Modo de Uso: Consiste em lubrificar o dispositivo antes da inserção, garantindo um procedimento mais confortável e seguro para o paciente. A introdução deve ser realizada com cuidado e exclusivamente por profissionais qualificados. Posicionamento e Inserção: O paciente é colocado em decúbito lateral esquerdo (posição de Sims), com a perna direita flexionada. A cânula flexível de três vias deve ser devidamente lubrificada, e inserida no ânus, para atingir o reto. Profundidade: A ponta da cânula é introduzida apenas o suficiente para ultrapassar o esfíncter anal (cerca de cinco a 10 cm). Na via com o corta fluxo, o balão de retenção é inflado utilizando a pera. Após tracione suavemente até sentir resistência, garantindo o posicionamento correto. Na via intermediária conecte a Alko-Bag preenchida na cânula flexível de três vias. E na outra via, injete ar utilizando a pera. Após a conclusão do exame, a cânula deve ser removida de forma cuidadosa e descartada imediatamente, seguindo os protocolos de descarte estabelecidos.

Cuidados e Advertências: Verificação cuidadosa da integridade da embalagem antes da utilização, certificando-se de que não existam furos, manchas ou qualquer tipo de dano que comprometa a esterilidade do produto. Por se tratar de um dispositivo de uso único, a cânula não deve ser reutilizada em nenhuma circunstância, e a embalagem deve ser aberta somente no momento imediato ao uso, preservando sua condição estéril até o procedimento. A manipulação e a aplicação da cânula devem ser realizadas exclusivamente por profissionais capacitados e devidamente habilitados.

Armazenamento: O produto deve ser mantido armazenado em sua embalagem original até o momento do uso, garantindo a preservação de sua esterilidade e integridade. É essencial que seja conservado em local protegido de danos físicos, umidade e possíveis fontes de contaminação, assegurando que suas condições permaneçam adequadas para o procedimento. A cânula possui validade indeterminada, desde que a embalagem permaneça íntegra durante todo o período de armazenamento.

Descarte: Deve ser realizado imediatamente após o uso, seguindo rigorosamente as normas e exigências de descarte de resíduos hospitalares estabelecidas pela legislação local.

Precauções: Incluem a necessidade de verificar cuidadosamente a integridade da embalagem antes do procedimento, garantindo que não haja aberturas, manchas ou danos que possam comprometer a esterilidade. O produto deve ser manipulado apenas por profissionais capacitados e conhecedores das técnicas adequadas para sua utilização. Por tratar-se de um dispositivo de uso único, não deve ser reutilizado e sua remoção da embalagem deve ocorrer somente no momento da aplicação. Durante a inserção, é fundamental evitar pressão sobre o nervo vago, prevenindo episódios de retenção vaginal e síncope, além de ser essencial não empregar força excessiva ou realizar inserção profunda, a fim de evitar riscos de trauma ou perfuração anal. O procedimento não deve ser realizado em pacientes com colostomia que exija cateteres específicos, cirurgia retal recente ou obstrução de cólon, condições que constituem contraindicações expressas.

Apresentação: Em embalagem individual estéril.