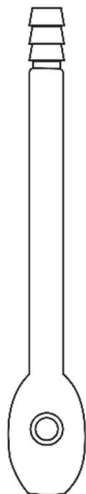


Fabricante Recomenda Uso Único. Esterilizados por Óxido de Etileno

Cânula rígida de uma via

Descrição: Cânula rígida de uma via (cânula retal) é um tubo de PVC atóxico, utilizada nos procedimentos de Clister/Enema Opaco. Foi desenvolvida para introduzir no intestino do paciente de forma higiênica e segura, a quantidade de sulfato de bário necessária para a realização do exame. A cânula retal poderá ser usada com uma pera (acessório), fabricada em PVC, para realização do procedimento denominado duplo contraste.

Indicação: A cânula e a pera (acessório) são indicados nos procedimentos de Clister/Enema Opaco e duplo contraste. A finalidade será de introduzir através do ânus a suspensão de sulfato de bário e/ou ar no intestino do paciente. Este exame é utilizado em pacientes que precisam investigar alguma possível patologia, a qual não é identificada em outro procedimento.

Modo de Uso: Retire a cânula da embalagem e conecte-a na ALKO-Bag; coloque o paciente deitado, em posição lateral e, introduza cuidadosamente a cânula retal no ânus fazendo com que por gravidade, após abertura do *clamp*, o sulfato de bário que está na bolsa seja introduzido no intestino. Após o término do exame deve-se retirar a cânula cuidadosamente e descartá-la. Cabe ressaltar, que o tubo da bolsa deverá ser clampado antes do seguinte manuseio: para a realização do duplo contraste, é necessário retirar o bico de plástico e encaixar a pera na cânula retal. Após infle o ar da pera na cânula retal, finalize o procedimento.

Cuidados e Advertências: A cânula e a pera não deverão ser reutilizadas, isso evitará o risco de contaminações cruzadas entre os pacientes; uma vez que, durante a execução do procedimento ela poderá entrar em contato com as excreções do mesmo.

Armazenamento: Temperatura ambiente entre 15°C e 30°C. A cânula possui validade indeterminada, desde que a embalagem permaneça íntegra durante todo o período de armazenamento.

Descarte: Deve ser realizado imediatamente após o uso, seguindo rigorosamente as normas e exigências de descarte de resíduos hospitalares estabelecidas pela legislação local. Por se tratar de um produto de uso único, não deve ser reutilizado, reprocessado ou submetido a qualquer forma de reaproveitamento, devendo ser eliminado como material potencialmente contaminado para garantir a segurança de pacientes e profissionais.

Precauções: Não utilizar o produto se a embalagem estiver aberta ou danificada. Produto de uso único e descartável. Não reutilizar o produto. Destruir após o uso.

Apresentação: Adulto. Em embalagem individual estéril.