


Fabricante Recomenda Uso Único. Esterilizados por Óxido de Etileno

Fio Guia AlkoWire

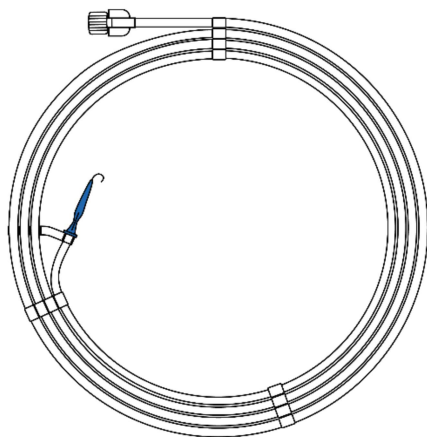

Descrição: O fio-guia é composto por fio tubular e bobina de mola. O produto é fabricado em aço inoxidável com angulação e revestido com PTFE ou hidrofílico.

Indicação: O fio-guia pode ser utilizado em procedimentos com acesso a algumas veias e em angiografias para embolização arterial, colocação de *stent* e angioplastia com balão. Também pode ser utilizado em angiografias das artérias renais e na colocação de *stent*, em estruturas que não pertencem ao sistema circulatório central.

O fio-guia também pode ser utilizado em procedimentos angiográficos relacionados a trombos, bem como na colocação de *stent* no ducto pancreático e no ducto biliar.

Modo de Uso: Abra a embalagem e retire o dispositivo. Utilize uma seringa conectada para injetar solução fisiológica através do *hub* ou do tubo de proteção, a fim de limpar o fio-guia. Retire o fio-guia do tubo de proteção. Insira o fio-guia no lúmen da artéria por meio dos dispositivos introdutores e de passagens apropriadas. Mantenha a extremidade externa do fio-guia fora do cateter durante o procedimento.

Cuidados e Advertências: A reutilização de dispositivos descartáveis pode criar risco potencial ao paciente ou ao usuário. Pode levar à contaminação e/ou ao comprometimento da capacidade funcional do dispositivo. A contaminação e/ou a funcionalidade limitada do dispositivo podem levar a lesões, doenças ou morte do paciente. O tratamento e o descarte dos resíduos hospitalares devem estar em conformidade com os requisitos legais e regulamentares locais. Não utilize o fio-guia com dispositivos que contenham peças metálicas que possam danificar ou romper seu revestimento. Não remodele o fio-guia.

Armazenamento: Armazenar em local fresco e ventilado em temperatura ambiente.

Descarte: Descarte o produto de acordo com os procedimentos padronizados pela instituição hospitalar, para materiais potencialmente contaminados.

Precauções: Não utilize o produto caso a embalagem esteja danificada. O produto é para uso único, proibido reprocessar. Não utilize após o prazo de validade. Não mude a estrutura do produto no processo de uso.

Apresentação: Embalagem constituída de filme e papel grau cirúrgico. Disponível nas apresentações com ponta reta, ponta em J ou ponta angulada e nos comprimentos de 150 cm, 180 cm ou 260 cm.