


Produto de Uso Único – Esterilizada por Óxido de Etileno

MANIFOLD 5 vias 3 torneiras- AM307

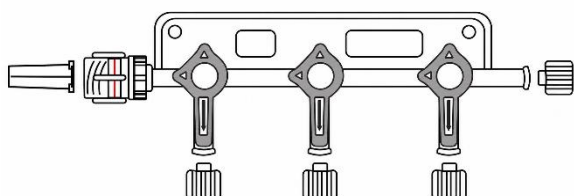

Descrição: O manifold é composto de conector de amplitude, torneira de abertura e vias multicêntricas. As matérias primas são POM (polioximetileno) e PC (policarbonato).

Indicação: O produto é utilizado em operações de angioplastia percutânea, com finalidade de construir passagens múltiplas para líquidos e heparinização com solução fisiológica monitoramento de pressão.

Modo de Uso: Abra a embalagem, retire o dispositivo e verifique se não está danificado. Conecte a outros dispositivos, como seringa de angiografia, tubo de monitoramento de pressão e controle as vias girando a torneira de abertura.

Cuidados e Advertências: Não reutilizar o dispositivo pois pode haver risco de contaminação microbiológica.

Contraindicação: Não existe nenhuma contraindicação.

Armazenamento: Temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

Descarte: Descartar o produto de acordo com os procedimentos padronizados pelo hospital ou clínica, para materiais potencialmente contaminados.

Precauções: Não utilize o produto caso a embalagem esteja danificada. Não utilize após o prazo de validade.

Apresentação: Manifold 05 vias 03 torneiras, ON ESQ (AM0307- 350psi).