


Patient- Set T.S.

(evidência científica- Proteção viral)

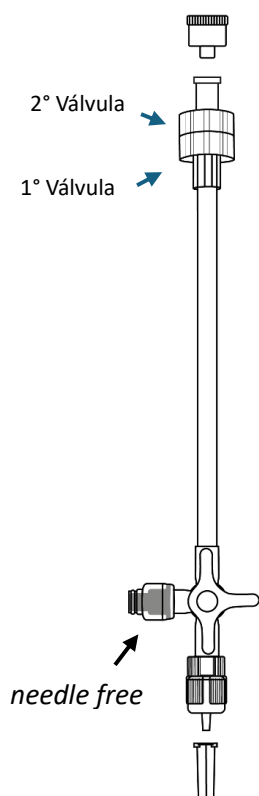

Descrição: Conector para Ressonância Magnética (RM) e Tomografia Computadorizada (TC) em PVC atóxico flexível, transparente, isento de metal, livre de látex, livre de DEHP e torneira multiviva em policarbonato com sistema fechado em silicone (*needle free*) e superfície lisa que permite fácil desinfecção. A conexão macho corresponde a uma torneira, que é reversível em PVC atóxico e tampa protetora em polietileno de alta densidade é ventilada/vazada para facilitar a retirada de ar. O conector macho da torneira será acoplado ao cateter do acesso venoso do paciente. Possui conector fêmea com válvula dupla antirrefluxo, em policarbonato, com abertura por pressão, com tampa protetora. Produto suporta pressão até 300 PSI. Estéril e apirrogênico, a menos que a embalagem esteja danificada. Peça Única.

Indicação: Para injeção de meios de contraste (MC)/ solução fisiológica (SF), coleta de sangue e medicamentos.

Modo de Uso: Em condições assépticas, abrir a embalagem. Preencher o Patient-Set TS com SF estéril, utilizando seringa de 10 mL ou 20 mL, até a total eliminação do ar, mantendo-o conectado à seringa ou com oclisor estéril. Outra opção é a retirada do ar do Patient-Set TS, já conectado no extensor da injetora, de duas seringas com SF. Para injetora de uma seringa, preencher o Patient-Set TS com contraste, já acoplado ao sistema multipaciente (Transfer- Fill 24h).

Acoplar a torneira firmemente ao cateter periférico que está puncionado no paciente. Acoplar a válvula antirrefluxo do Patient- Set TS ao Transfer- Fill 24h. Este procedimento deve ser realizado por profissional altamente especializado e treinado, para que possa manusear o produto adequadamente, mantendo a integridade do mesmo, para o benefício do paciente.

A torneira proximal ao paciente permite verificar se o acesso está pérvio ou coleta de sangue.

No caso de verificação de acesso pérvio:

- Será realizado pela *needle free*;
- Antes de conectar a seringa, faça a desinfecção com álcool 70 na *needle free*, seguindo o protocolo da instituição;
- Conecte a seringa e puxe o sangue;
- Retire a seringa, e feche a torneira para a *needle free*.

Coleta de sangue:

O Patient-Set TS possibilita a coleta de sangue, sem quebra de hemácias. Com apenas uma punção, o paciente tem a possibilidade de coletar sangue e realizar exames de diagnóstico por Imagem, na RM e TC.

-Preencha com solução fisiológica, retire todo o ar, acople ao cateter periférico do paciente, descarte a solução fisiológica acessando a *needle free* por um tubo de descarte ou por uma seringa de 3 ml, para então realizar a coleta de sangue. Feche a torneira, para a *needle free* e realize o exame com contraste. Este procedimento deve ser realizado por profissional altamente especializado e treinado, para que possa manusear o produto adequadamente, mantendo a integridade do mesmo, para o benefício do paciente.

Antes da realização de exames contrastados, acoplar a válvula antirrefluxo ao conector da injetora, que infunde MC e SF. A torneira deve ficar livre para conexão de equipos e/ou seringas possibilitando administração de soluções. E deve estar fechada no momento da administração de contraste, para o acesso lateral com a *needle free*. Para liberar a passagem é necessário virá-la, conforme setas indicativas.

Cuidados e Advertências: Não interage com o medicamento em nenhum momento. Proibido o uso de agulhas para preenchimento do conector. Siga a técnica asséptica ao utilizar materiais descartáveis. Não toque na extremidade dos conectores. Não remova as tampas de proteção até que esteja pronto para fazer conexões. Se o sangue ultrapassar a segunda válvula, é considerado refluxo. Descarte o produto e o sistema multipaciente. A utilização em desacordo com a instrução de uso do fabricante é de responsabilidade do operador.

- Caso haja difusão do sangue no Patient- Set TS conectado ao Transfer- Fill, o sangue pode chegar até a primeira válvula, não chegando até a segunda, esta segurança é respaldada por um estudo viral.
- Se o sangue ultrapassar a segunda válvula do Patient-Set TS, isto sim é denominado refluxo, e o Transfer- Fill deverá ser descartado.

Contraindicação: O produto não apresenta nenhuma contraindicação.

Armazenamento: Temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

Descarte: O produto deve ser descartado de acordo com os procedimentos padronizados pelo hospital ou clínica para materiais potencialmente contaminados, segundo o plano de gerenciamento de resíduos dos serviços de saúde.

Precauções:

- Verificar se não há presença de bolhas de ar, antes de conectar ao paciente;
- Certifique-se que houve uma conexão adequada com o cateter periférico, antes de iniciar o exame;
- Não utilize o produto caso a embalagem esteja danificada;
- Não utilize após o prazo de validade.

Apresentação: Extensor com comprimento de 15 cm, acondicionado em embalagem composta por filme e papel grau cirúrgico.

Legenda dos símbolos presentes na embalagem:



Consulte as instruções de uso



Não pirogênico



Não reutilizar



Não utilizar se a embalagem estiver danificada consultar as instruções de uso

ALKO DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Rua Mapendi 360, Taquara, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 22710-255

Tel: 55 21 2435.9335 | Fax: 55 21 2435.9300 | sac@alkodobrasil.com.br | CNPJ: 32.137.424/0001-99



Sistema de barreira feito com Estireno-Butadieno-Estireno



Dispositivo Médico



Livre de DEHP



Livre de latex



Esterilizado com óxido de etileno



Limite de temperatura (15°/30°)



Data de fabricação



Data de validade



Código do lote