


Fabricante Recomenda Uso Único. Esterilizados por Óxido de Etileno

Pera p/ insuflar

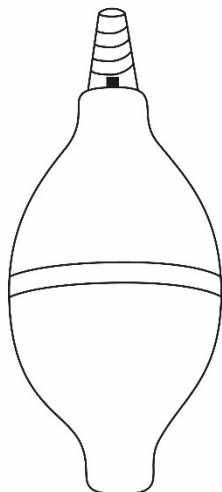

Descrição: A Pera Insufladora para Clister/Enema Opaco é um dispositivo fabricado em material PVC atóxico, desenvolvido para ser utilizado em conjunto com a cânula de uma via ou de três vias nos procedimentos radiológicos contrastados. Sua função é permitir a insuflação controlada de ar durante o exame, contribuindo para melhor distensão das estruturas intestinais e, conseqüentemente, para uma visualização mais precisa no estudo contrastado.

Indicação: é indicada para utilização em procedimentos radiológicos contrastados do intestino grosso, tais como o Clister/Enema Opaco para introdução de líquido/ ar, Colonoscopia Virtual com introdução de ar e exames similares que requerem a administração retal de MC (meios de contraste).

Modo de Uso: No modelo de cânula com balão de segurança, antes de inflá-lo, verifique se a cânula está introduzida de forma adequada no anorretal do paciente. Infle com aproximadamente 100 cc (centímetro cúbico) ou 100 mL de ar e verifique se a cânula está fixa no anorretal do paciente, realize o exame e ao finalizar esvazie o balão de retenção e solte o grampo, antes de remover a cânula. Remova e descarte a pera com a sonda apropriadamente.

Cuidados e Advertências: Durante o manuseio da pera, é essencial manipular a cânula acoplada a pera com cuidado, evitando aplicar pressão excessiva sobre a região anorretal. A inserção e a manutenção do dispositivo devem ser conduzidas somente por profissionais habilitados e familiarizados com as técnicas de exame contrastado.

Este dispositivo não deve ser utilizado em pacientes com colostomia — que exigem cateteres específicos — nem em indivíduos submetidos recentemente a cirurgias retais. Nos casos de suspeita ou diagnóstico de obstrução de cólon, o exame com sulfato de bário é contraindicado e deve ser substituído por alternativas adequadas conforme avaliação clínica.

Armazenamento: Armazenar em local fresco e ventilado em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C. A pera para insuflar possui validade indeterminada, desde que a embalagem permaneça íntegra durante todo o período de armazenamento.

Descarte: Deve ser realizado imediatamente após o uso, seguindo rigorosamente as normas e exigências de descarte de resíduos hospitalares estabelecidas pela legislação local. Por se tratar de um produto de uso único, não deve ser reutilizado, reprocessado ou submetido a qualquer forma de reaproveitamento, devendo ser eliminado como material potencialmente contaminado para garantir a segurança de pacientes e profissionais.

Precauções: Antes da utilização, o profissional deve verificar atentamente se a embalagem da pera está íntegra, sem sinais de violação, furos, manchas ou qualquer irregularidade que possa comprometer sua esterilidade. O dispositivo deve ser retirado da embalagem apenas no momento do uso, evitando riscos de contaminação.

Nos modelos equipados com balão de retenção, a insuflação deve ser realizada com extremo cuidado, utilizando exclusivamente o volume recomendado, limitado a no máximo 100 cc de ar. A aplicação de pressões superiores pode causar danos à mucosa ou outras lesões ao paciente. Uma vez posicionado, a cânula não deve ser movimentada indevidamente, já que qualquer deslocamento desnecessário pode causar desconforto, risco de lesão ou comprometimento do procedimento.

Apresentação: Uso Adulto. Em embalagem individual estéril.