


O produto não pode ser reprocessado. Esterilizados por Óxido de Etileno

Transfer-Fill 1 Via

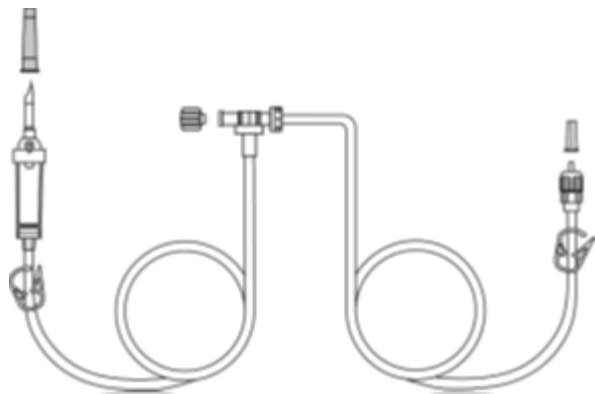

Descrição: Extensor de uma via, para Tomografia Computadorizada e Ressonância Magnética, estéril em PVC atóxico, livre DEHP, livre de látex, transparente e apirogênico possui conectores, macho e fêmea, com válvula antirrefluxo T e *clamp* distal; para aspiração e injeção de meios de contraste, por meio de injetora de uma seringa, tubo liso de no mínimo 100 cm entre o perfurador com câmara gotejadora e a válvula antirrefluxo T, tubo liso de 150 cm até a conexão macho. Produto suporta pressão de até 350 PSI.

Indicação: Para injeção de Meios de Contraste.

Modo de Uso: Com meios assépticos abrir a embalagem. Retirar a tampa protetora da conexão fêmea e conectá-la na seringa de meios de contraste já instalada na injetora. Retirar a tampa do perfurador e conectá-lo ao frasco de meios de contraste. A extensão lisa que contém o conector macho, deverá ser acoplada ao conector da linha Patient-Set. Contém um *clamp* que ao ser acionado bloqueia o fluxo. O uso do Transfer-Fill 1 Via é de oito (8) até vinte e quatro (24) horas utilizado necessariamente com a linha Patient-Set, possuindo estudo clínico microbiológico que comprova este tempo. A linha Patient-Set é de uso único, sempre um por paciente. O uso do Transfer-Fill 1 Via deve ser continuado, se não for identificado refluxo da linha Patient-Set. A contaminação pode resultar de inobservância da técnica asséptica. A linha Patient-Set deve ser utilizada conforme instruções de uso definidas para cada modelo. Em caso de refluxo, o Transfer-Fill 1 Via deve ser trocado. Quando utilizado com dispositivos médicos que não sejam da linha Patient-Set, o Transfer-Fill 1 Via deve ser considerado de uso único, pois esses dispositivos não fizeram parte dos estudos que validaram o período de uso do conjunto (Transfer-Fill 1 Via / linha Patient-Set).

Cuidados e Advertências: O produto não apresenta nenhuma contraindicação. Não interage com o medicamento em qualquer momento. Proibido o uso de agulhas para preenchimento do extensor. Siga a técnica asséptica ao utilizar materiais descartáveis. Não toque na extremidade dos conectores. Não remova as tampas de proteção até que esteja pronto para fazer as conexões. A utilização em desacordo com a instrução de uso do fabricante é de responsabilidade do operador.

Armazenamento: Temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

Descarte: Descartar o produto, de acordo com os procedimentos padronizados do hospital ou clínica para materiais potencialmente contaminados.

Precauções: Verificar se as conexões estão bem fixas antes de iniciar o teste do acesso venoso com solução fisiológica e posteriormente a administração dos meios de contraste. Não utilize o produto caso a embalagem esteja danificada. Não utilize após o prazo de validade.

Apresentação: Embalagem composta por filme plástico e papel grau cirúrgico, garantindo a manutenção da esterilidade até a abertura a menos que a embalagem esteja danificada. Extensor para administração de fluidos, constituído por tubo em PVC transparente e liso com uma via e comprimento de 150 cm. Peça única

Legenda dos símbolos presentes na embalagem:

	Consulte as instruções de uso
	Não pirogênico
	Não reutilizar
	Não utilizar se a embalagem estiver danificada consultar as instruções de uso
	Sistema de barreira feito com Estireno-Butadieno-Estireno
	Dispositivo Médico
	Livre de DEHP
	Livre de latex
	Esterilizado com óxido de etileno
	Limite de temperatura (15°/30°)
	Data de fabricação
	Data de validade
	Código do lote

ALKO DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Rua Mapendi 360, Taquara, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 22710-255

Tel: 55 21 2435.9335 | Fax: 55 21 2435.9300 | sac@alkodobrasil.com.br | CNPJ: 32.137.424/0001-99