


O produto não pode ser reprocessado. Esterilizados por Óxido de Etileno

Transfer-Fill T

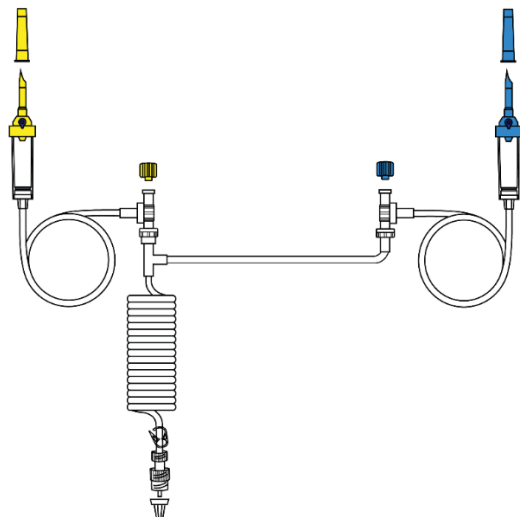

Descrição: Extensor de duas vias em T, para Tomografia Computadorizada e Ressonância Magnética, estéril em PVC atóxico, livre DEHP, livre de látex, transparente e apirogênico possui conectores, macho e fêmea, com válvulas antirrefluxo T e *clamp* distal; para aspiração e injeção de meios de contraste e/ou solução fisiológico, por meio de injetoras de duas seringas, tubos lisos de no mínimo 100 cm entre o perfurador com câmara gotejadora e a válvula antirrefluxo T, tubo espiralado de 180 cm até a conexão macho. Produto suporta pressão de até 350 PSI.

Indicação: Para injeção de Meios de Contraste.

Modo de Uso: Com meios assépticos abrir a embalagem. Retirar as tampas protetoras das conexões fêmeas e conectá-las nas seringas já instaladas na injetora, de forma que o conector fêmea com tampa azul deve ser utilizado na seringa de solução fisiológica e o conector fêmea com tampa amarela deve ser utilizado na seringa de meios de contraste. Retirar a tampa do perfurador azul e conectá-lo à solução fisiológica. Retirar a tampa do perfurador amarelo e conectá-lo ao frasco de meios de contraste. A extensão espiralada que contém o conector macho, deverá ser acoplada ao conector da linha Patient-Set. Contém um *clamp* que ao ser acionado bloqueia o fluxo. O uso do Transfer-Fill é de oito (8) até vinte e quatro (24) horas utilizado necessariamente com a linha Patient-Set, possuindo estudo clínico microbiológico que comprova este tempo. A linha de Patient-Set é de uso único, sempre um por paciente. O uso do Transfer-Fill T deve ser continuado, se não for identificado refluxo da linha Patient-Set. A contaminação pode resultar de inobservância da técnica asséptica. A linha Patient-Set deve ser utilizada conforme instruções de uso definidas para cada modelo. Em caso de refluxo, o Transfer-Fill T deve ser trocado. Quando utilizado com dispositivos médicos que não sejam da linha Patient-Set, o Transfer-Fill T deve ser considerado de uso único, pois esses dispositivos não fizeram parte dos estudos que validaram o período de uso do conjunto (Transfer-Fill T/ linha Patient-Set).

Cuidados e Advertências: O produto não apresenta nenhuma contraindicação. Não interage com o medicamento em qualquer momento. Proibido o uso de agulhas para preenchimento do extensor. Siga a técnica asséptica ao utilizar materiais descartáveis. Não toque na extremidade dos conectores. Não remova as tampas de proteção até que esteja pronto para fazer as conexões. A utilização em desacordo com a instrução de uso do fabricante é de responsabilidade do operador.

Armazenamento: Temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

Descarte: Descartar o produto, de acordo com os procedimentos padronizados do hospital ou clínica para materiais potencialmente contaminados.

Precauções: Verificar se as conexões estão bem fixas antes de iniciar o teste do acesso venoso com solução fisiológica e posteriormente a administração dos meios de contraste. Não utilize o produto caso a embalagem esteja danificada. Não utilize após o prazo de validade.

Apresentação: Embalagem composta por filme plástico e papel grau cirúrgico, garantindo a manutenção da esterilidade até a abertura a menos que a embalagem esteja danificada. Extensor para administração de fluidos, constituído por tubo em PVC transparente, liso e espiralado, com duas vias e comprimento de 180 cm. Peça única

Legenda dos símbolos presentes na embalagem:



Consulte as instruções de uso



Não pirogênico



Não reutilizar



Não utilizar se a embalagem estiver danificada consultar as instruções de uso



Sistema de barreira feito com Estireno-Butadieno-Estireno



Dispositivo Médico



Livre de DEHP



Livre de latex



Esterilizado com óxido de etileno



Limite de temperatura (15°/30°)



Data de fabricação



Data de validade



Código do lote

ALKO DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Rua Mapendi 360, Taquara, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 22710-255

Tel: 55 21 2435.9335 | Fax: 55 21 2435.9300 | sac@alkodobrasil.com.br | CNPJ: 32.137.424/0001-99