


Fabricante Recomenda Uso Único. Esterilizados por Óxido de Etileno

TRANSFER-SET 1 VIA

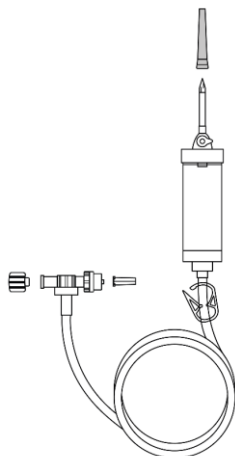

Descrição: Conector para Ressonância Magnética e Tomografia Computadorizada em PVC atóxico flexível, isento de metal, livre de DEHP e livre de látex, com válvula antirrefluxo em T, perfurador com câmara de gotejamento em PVC e tampa protetora em polietileno de alta densidade. Produto suporta pressão de até 350 PSI.

Indicação: Para aspiração de meios de contraste (MC) e/ou solução fisiológico (SF).

Modo de Uso: Com meios assépticos abrir a embalagem. Acoplar a parte que contém o perfurador no frasco de MC e/ou SF a ser aspirado para a seringa, de acordo com a necessidade. A outra parte que contém a válvula antirrefluxo em T será conectada na seringa da injetora.

Cuidados e Advertências: O produto não apresenta nenhuma contraindicação. Não interage com o medicamento em nenhum momento. Proibido o uso de agulhas para preenchimento do conector.

Armazenamento: Temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

Descarte: Descartar o produto de acordo com os procedimentos padronizados no hospital ou clínica para materiais potencialmente contaminados.

Precauções: Verificar se as conexões estão bem fixas antes de iniciar a aspiração de MC e/ou SF. Não utilize o produto caso a embalagem esteja danificada. Não utilize após o prazo de validade. Este procedimento deve ser realizado por profissional altamente especializado e treinado na execução de técnicas cujo objetivo principal é manter a integridade do produto para o benefício do paciente.

Apresentação: Embalagem constituída de filme e papel grau cirúrgico, com 120cm de comprimento. Perfurador com câmara de gotejadora de 1 via. Estéril e apirógeno, a menos que a embalagem esteja danificada. Peça Única.

Legenda dos símbolos presentes na embalagem:



Consulte as instruções de uso



Não pirogênico



Não reutilizar



Não utilizar se a embalagem estiver danificada consultar as instruções de uso



Sistema de barreira feito com Estireno-Butadieno-Estireno



Dispositivo Médico



Livre de DEHP



Livre de latex



Esterilizado com óxido de etileno



Limite de temperatura (15°/30°)



Data de fabricação



Data de validade



Código do lote