


Fabricante Recomenda Uso Único. Esterilizados por Óxido de Etileno

Transfer-Set 3 vias

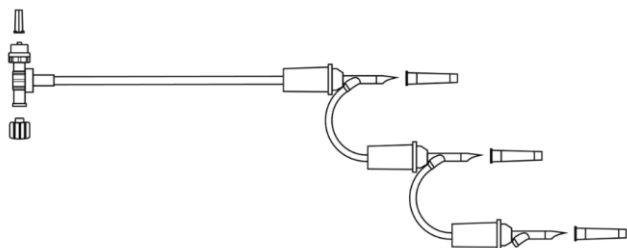

Descrição: Conector para Ressonância Magnética e Tomografia Computadorizada em PVC atóxico flexível, isento de metal, livre de DEHP e livre de látex, com válvula antirrefluxo em T, três perfuradores em PVC e tampa protetora em polietileno de alta densidade. Produto suporta pressão de até 350 PSI.

Indicação: Para aspiração de meios de contraste (MC) e/ ou Soluções fisiológicas (SF).

Modo de Uso: Com meios assépticos abrir a embalagem. Acoplar a parte que contém o perfurador no frasco de MC e/ou SF, a ser aspirado para a seringa, de acordo com a necessidade. A outra parte que contém a válvula antirrefluxo em T será conectada na seringa da injetora.

Cuidados e Advertências: O produto não apresenta nenhuma contraindicação. Não interage com o medicamento em qualquer momento. Proibido o uso de agulhas para preenchimento do conector. Siga a técnica asséptica ao utilizar materiais descartáveis. Não toque na extremidade dos conectores. Não remova as tampas de proteção até que esteja pronto para fazer conexões. A utilização em desacordo com a instrução de uso do fabricante é de responsabilidade do operador. Este procedimento deve ser realizado por profissional altamente especializado e treinado na execução de técnicas cujo objetivo principal é manter a integridade do produto para o benefício do paciente.

Armazenamento: Temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

Descarte: Descartar o produto de acordo com os procedimentos padronizados no hospital ou clínica para materiais potencialmente contaminados.

Precauções: Verificar se as conexões estão bem fixas antes de iniciar a aspiração de MC e/ou SF. Não utilize o produto caso a embalagem esteja danificada. Não utilize após o prazo de validade.

Apresentação: Embalagem constituída de filme e papel grau cirúrgico, com 100 cm de comprimento. Estéril e apirógeno, a menos que a embalagem esteja danificada. Peça Única.

Legenda dos símbolos presentes na embalagem:

	Consulte as instruções de uso
	Não pirogênico
	Não reutilizar
	Não utilizar se a embalagem estiver danificada consultar as instruções de uso
	Sistema de barreira feito com Estireno-Butadieno-Estireno
	Dispositivo Médico
	Livre de DEHP
	Livre de latex
	Esterilizado com óxido de etileno
	Limite de temperatura (15°/30°)
	Data de fabricação
	Data de validade
	Código do lote

ALKO DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Rua Mapendi 360, Taquara, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 22710-255

Tel: 55 21 2435.9335 | Fax: 55 21 2435.9300 | sac@alkodobrasil.com.br | CNPJ: 32.137.424/0001-99